



mobilia

Das Sitz- und Aufstehbett

mobilia Sitz- und Aufstehbett

Mobilität für den Patienten und Arbeitserleichterung für die Pflegenden

Durch das mobilia Sitz- und Aufstehbett, in seinen unterschiedlichen Varianten casa, cura und integra, wird dem Patienten die Fähigkeit zurück gegeben, völlig eigenständig oder mit nur minimaler Unterstützung aus dem Bett aufzustehen.

Drehbare Liegefläche – Neue Mobilität

Die Pflegebettserie mobilia ist sowohl für die häusliche und institutionelle Pflege geeignet. Die Auswirkungen vieler Krankheitsbilder sind oft körperliche Einschränkungen in der Mobilität. Einschränkungen betreffen oftmals den Bewegungsapparat des zu Pflegenden, Drehbewegungen sind oft nicht möglich, das eigenständige Aufsetzen im Bett fällt schwer oder ist sogar unmöglich und führen so zu einer erheblichen Einschränkung der eigenen Lebensqualität.

Das mobilia Sitz- und Aufstehbett wird für viele unterschiedliche Behinderungen und Erkrankungen, wie beispielsweise bei Einschränkungen im Bewegungsablauf, bei zu geringer Muskelkraft, Bettlägerigkeit, zur Unterstützung bei eingeschränkter Belastung der Lendenwirbelsäule bzw. der Gelenke, bei sitzender Lagerung durch Herzinsuffizienz oder zur Mobilisierung etc., eingesetzt. Patienten haben durch das Pflegebett mobilia, das alle Standardfunktionen eines normalen Pflegebettes besitzt, sowie der zusätzlichen Sitzposition und der optionalen Aufstehhilfe, eine bessere Wahrnehmung des Umfeldes.

Die Mobilität des Patienten sowie der Transfer wird erheblich erleichtert und vom Patienten als angenehm empfunden. Ebenfalls schaffen die mobilia Sitz- und Aufstehbetten für den zu Pflegenden eine neue Unabhängigkeit und ermöglichen ein wieder eigenständiges aufstehen können.

Für die pflegenden Angehörigen, das pflegende Umfeld sowie das Pflegepersonal stellt die Pflegebettserie mobilia eine wesentliche Erleichterung in der Pflege dar, beugt Berufskrankheiten bei Pflegepersonal vor, unterstützt pflegende Angehörige und verhilft zu mehr Lebensqualität für den Pflegenden.

Mobilität ganz leicht – mit der Aufstehhilfe aus der Pflegebettserie mobilia.

Komfort

- komfortables Liegegefühl durch
- 2-geteilte Matratze
 - Aufrichter mit Triangelgriff
 - spezieller Spannbezug (alles im Lieferumfang enthalten)
 - Armlehnen optional lieferbar.

Funktion

- extreme Aufsteherleichterung durch Aufstehhilfe und vollmotorisch drehbare Liegefläche
- elektrische Verstellung der Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne sowie Hub und Aufstehhilfe
- Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
- mobilia casa: Einzelradfeststellung
- mobilia cura: Einzel- oder 2-Rad-Zentralfeststellung
- mit Lifter unterfahrbar
- max. Patientengewicht 100 kg



Design

- wohnliches und formschönes Design der Kopf- und Fußteile

Einsatzbereiche

- Pflege zu Hause, in Senioren- und Pflegeheimen, Hospizen, Rehaeinrichtungen und Altenheimen
- Betteinsatz mobilia **integra** neben dem privaten Einsatz prädestiniert für spezielle Verwendungen wie z.B. in Hotels oder Kreuzfahrtschiffen, (für vorhandene Doppel- oder Einzelbetten)



mobilia cura

Individualität

- andere Holzdekore auf Anfrage möglich
- optional mit Stahlgitterliegefläche
- Metallbeschichtung in verschiedenen RAL-Farben
- Liegeflächenbreiten 90 cm oder 100 cm
- Bettverlängerung auf 220 cm möglich

Funktionsablauf



1. Liegeposition



2. Kopf- und Fußteilverstellung



3. Drehung der LF um 45°



4. Drehung der LF um 90°



5. Sitzposition



6. Aufstehposition


mobilia cura Scherenhubbett

Der stabile Verwandlungskünstler

Das mobilia cura (mit seinen Varianten mobilia cura, cura e sowie cura e plus) stellt eine der beiden Grundvarianten unseres mobilia-Programmes dar. In seiner Grundkonstruktion basiert es auf einem Scherenhub-System, was vor allem für extreme Stabilität steht. Es besticht weiterhin durch ein klares, leichtes Design und integriert sich damit in jede bestehende Wohneinrichtung.

- Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne sowie Höhenverstellung und Aufstehhilfe
- mit Lifter unterfahrbar
- Liege- und Sitzhöhe von 40 - 80 cm stufenlos verstellbar (mobilia cura e plus 48 - 80 cm)

Ausstattungsvarianten

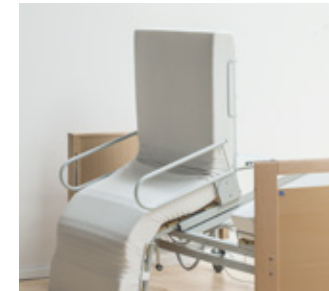

mobilia cura e plus

- vollelektrische Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
- vollelektrische Dreh- und Aufstehfunktion



mobilia cura e

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- vollelektrische Drehfunktion der LF



mobilia cura

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- manuelle Drehfunktion der LF





mobilia casa Frontenhubbett

Der elegante Verwandlungskünstler

Das mobilia casa (mit seinen Varianten mobilia casa, casa e sowie casa e plus) stellt die zweite Grundvariante unseres mobilia Programmes dar. Bei dieser Version ist das Hebesystem in Fuß- und Kopfteil integriert. Diese elegante Lösung ermöglicht vor allem eine perfekte Unterfahrbarkeit des Bettes von Liftersystemen, erleichtert aber auch das Reinigen unterhalb des Bettes.

- Liegeflächendrehung beidseitig wählbar
- elektrisch verstellbare Rücken-, Ober- und Unterschenkellehne sowie Höhenverstellung und Aufstehhilfe
- mit Lifter unterfahrbar
- Liege- und Sitzhöhe von 40 - 80 cm stufenlos elektrisch verstellbar

Ausstattungsvarianten



mobilia casa e plus

- vollelektrische Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
- vollelektrische Dreh- und Aufstehfunktion



mobilia casa e

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- vollelektrische Drehfunktion der LF



mobilia casa

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- manuelle Drehfunktion der LF





mobilia integra Betteinsatz

Die flexible Nachrüstlösung für vorhandene Einzel- oder Doppelbetten

Die Situation einer körperlichen Einschränkung kommt oft plötzlich. Es gilt möglichst schnell eine Lösung zur Entlastung von Patient und Pflegenden zu finden. Für diesen Fall bietet Mühle Müller Pflegebetten eine Version des mobilia-Bettes an, die diese Sorgen zerstreut – das mobilia integra mit allen Funktionen des mobilia-Systems als reines Funktionselement ohne Bettumrandung. Das mobilia integra lässt sich in alle bestehenden Einzel- oder Doppelbetten integrieren und ist damit die perfekte Lösung für alle, die in ihrem gewohnten häuslichen Umfeld verbleiben möchten.



mobilia integra e plus

- vollelektrische Liegeflächenverstellung mit Aufstehhilfe
- vollelektrische Dreh- und Aufstehfunktion



mobilia integra e

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- vollelektrische Drehfunktion der LF



mobilia integra

- vollelektrische Liegeflächenverstellung
- manuelle Drehfunktion der LF





mobilia integra - die perfekte Integration in Ihr
vorhandenes Bett

mobilia Modelle

Ihr individuelles **mobilia** in wohnlichem Holzdesign



napoli



hamilton

Alle **mobilia** Modelle sind optional in vielen hochwertigen Holz- und Designvarianten erhältlich - Sonderwünsche werden ebenfalls gerne erfüllt.

So können Sie jedes **mobilia** nach Ihren eigenen Vorstellungen gestalten und uns so Ihrer persönlichen Wohnsituation anpassen.



hamilton



Produktion

Werner Mühle Metallverarbeitung
Boschstrasse 6
35799 Merenberg

Telefon: +49 (0) 6471 - 5065-0
Telefax: +49 (0) 6471 - 5065-13

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de



Vertrieb

m2 Handels- u. Vertriebs GmbH
Oststrasse 26
51766 Engelskirchen - Ränderoth

Telefon: +49 (0) 2263 - 9617-0

E-Mail: info@muehle-mueller.de
Internet: www.muehle-mueller.de